



Circuit chauffant avec appareil bi-niveaux **DreamStation^{MD}**



Connexion du circuit respiratoire DreamStation^{MD}

Pour brancher le circuit respiratoire à l'appareil :

1. Branchez le tuyau flexible à la sortie d'air sur le dessus de l'appareil (au-dessus du réservoir d'eau).
2. Assurez-vous que les languettes situées sur le côté du tuyau s'emboîtent dans les fentes de la sortie d'air.
3. Branchez le tuyau au masque. Pour connaître le positionnement approprié, référez-vous aux instructions fournies avec votre masque.

Évitez de tirer sur le tuyau ou de l'étirer. Cela pourrait entraîner des fuites au niveau du circuit.

Vérifiez que le tuyau n'est pas endommagé ou usé. Jetez et remplacez-le au besoin. Avisez votre inhalothérapeute de la situation au besoin.

Ajustement des réglages de l'humidificateur et du circuit chauffant

Si vous avez un humidificateur, vous pouvez ajuster les réglages de l'humidificateur ou de la température du circuit lorsque l'appareil fonctionne en suivant les étapes ci-dessous :


1. Tournez la molette de commande :
 - a. Sens horaire : réglage de l'humidificateur;
 - b. Sens anti-horaire : réglage du circuit chauffant.
2. Appuyez sur la molette de commande pour modifier le réglage.
3. Tournez la molette de commande jusqu'au réglage souhaité.
 - a. Sens horaire : augmentation;
 - b. Sens antihoraire : diminution.
4. Appuyez sur la molette de commande pour enregistrer le réglage.

Si vous utilisez l'humidificateur sans le circuit chauffant, tournez simplement la molette de commande pour modifier le réglage de l'humidificateur lorsque l'appareil fonctionne.

Entretien de votre circuit chauffant

Nettoyez régulièrement votre circuit respiratoire pour assurer un traitement optimal. Les informations suivantes vous sont utiles pour le démontage, le nettoyage, la vérification et le remontage de votre circuit respiratoire.

Déconnexion : Pour retirer le tuyau chauffant, appuyez sur les 2 languettes situées sur le côté du connecteur du tuyau et retirez le tuyau de la prise de sortie.

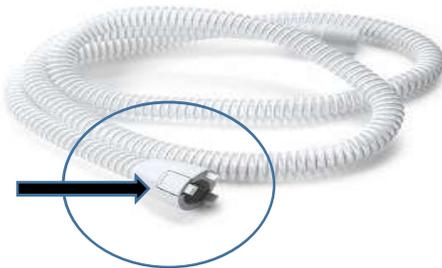

Nettoyage

1. Nettoyez votre circuit respiratoire à toutes les semaines.
2. Utilisez de l'eau tiède avec un détergent doux.
3. Ne plongez pas le bout avec fiche dans l'eau.
4. Ne lavez pas le circuit respiratoire dans une machine à laver ou dans un lave-vaisselle.
5. Rincez soigneusement le circuit respiratoire et laissez sécher en le suspendant à l'abri de la lumière directe du soleil et/ou de la chaleur.

Vérification

Vérifiez régulièrement que le circuit respiratoire n'est pas endommagé. Vous devez le remplacer s'il présente des trous, déchirures ou fissures.

Lorsque le circuit respiratoire est sec, vous pouvez le connecter à l'appareil.

Source : Philips/Respironics DreamStation BiPAP ST/AVAPS^{MD} Manuel d'utilisation 2016 et Philips/Respironics DreamStation Humidificateur chauffant^{MD} Manuel d'utilisation 2016.

Auteur : PNAVD – Québec, IUCPQ-UL 2019.

Toute reproduction est interdite sans l'autorisation du PNAVD-Québec de l'IUCPQ-UL.