

ResMed

AirFit™ P30i



Nouvelle tubulure montée sur le dessus

Le ResMed AirFit™ P30i offre un choix de coussins nasaires pour les patients qui préfèrent une tubulure au sommet de la tête. Tout comme le AirFit N30i, il se distingue par un contour SpringFit conçu pour s'adapter au visage de chaque patient. N'ayant que deux tailles de contour, cela permet de réduire le temps d'ajustement et de simplifier la gestion d'inventaire.



ResMed.com/AirFitP30i

Caractéristiques principales de l'AirFit P30i

Le coude à

dégagement rapide

permet un débranchement facile. Le coude à pincement reste fixé à la tubulure pour éviter que les pièces se coincent ou se perdent.

Le contour

SpringFit

s'ajuste automatiquement aux différents profils faciaux, permettant ainsi d'assurer un ajustement précis dès la première utilisation.

La tubulure au sommet

de la tête permet aux patients de dormir dans n'importe quelle position et plus près de leur conjoint.

Manches souples

conçus pour un meilleur confort et pour réduire les marques au visage.

Le coussinet

des coussins narinaires

est interchangeable avec le coussinet nasal en berceau du AirFit N30i.

L'orifice QuietAir™

diffuse l'air expiré en douceur afin de perturber au minimum le conjoint partageant le lit.



Codes de produit de l'AirFit P30i

Systèmes de masque complets (comprennent un système de contour, un harnais et 2 autres tailles de coussinets)

	Code de produit
STPK AMER AirFit P30i – STANDARD	63850
STPK AMER AirFit P30i – PETIT	63851
Masque de laboratoire de sommeil STPK AirFit P30i – STANDARD	63871
Masque de laboratoire de sommeil STPK AirFit P30i – PETIT	63872

Systèmes de contour (comprennent un contour, un coussinet et un coude)


	Code de produit
Sys Contour STANDARD AirFit P30i – L	63852
Sys Contour PETIT AirFit P30i – L	63853
Sys Contour STANDARD AirFit P30i – M	63854
Sys Contour PETIT AirFit P30i – M	63855
Sys Contour STANDARD AirFit P30i – P	63856
Sys Contour PETIT AirFit P30i – P	63857

Accessoires

	Code de produit
Coussin AirFit P30i – P	63861
Coussin AirFit P30i – M	63862
Coussin AirFit P30i – L	63863
Harnais AirFit 30i	63814

AirFit P30i vs Coussins en gel DreamWear

Dans une étude récente, la plupart des patients ont préféré le AirFit P30i aux coussins en gel DreamWear™ en raison de leur rendement global. Pour ceux ayant exprimé une préférence, plus de 70 % ont trouvé qu'il offrait une meilleure étanchéité et 66 % l'ont trouvé plus facile d'utilisation¹.

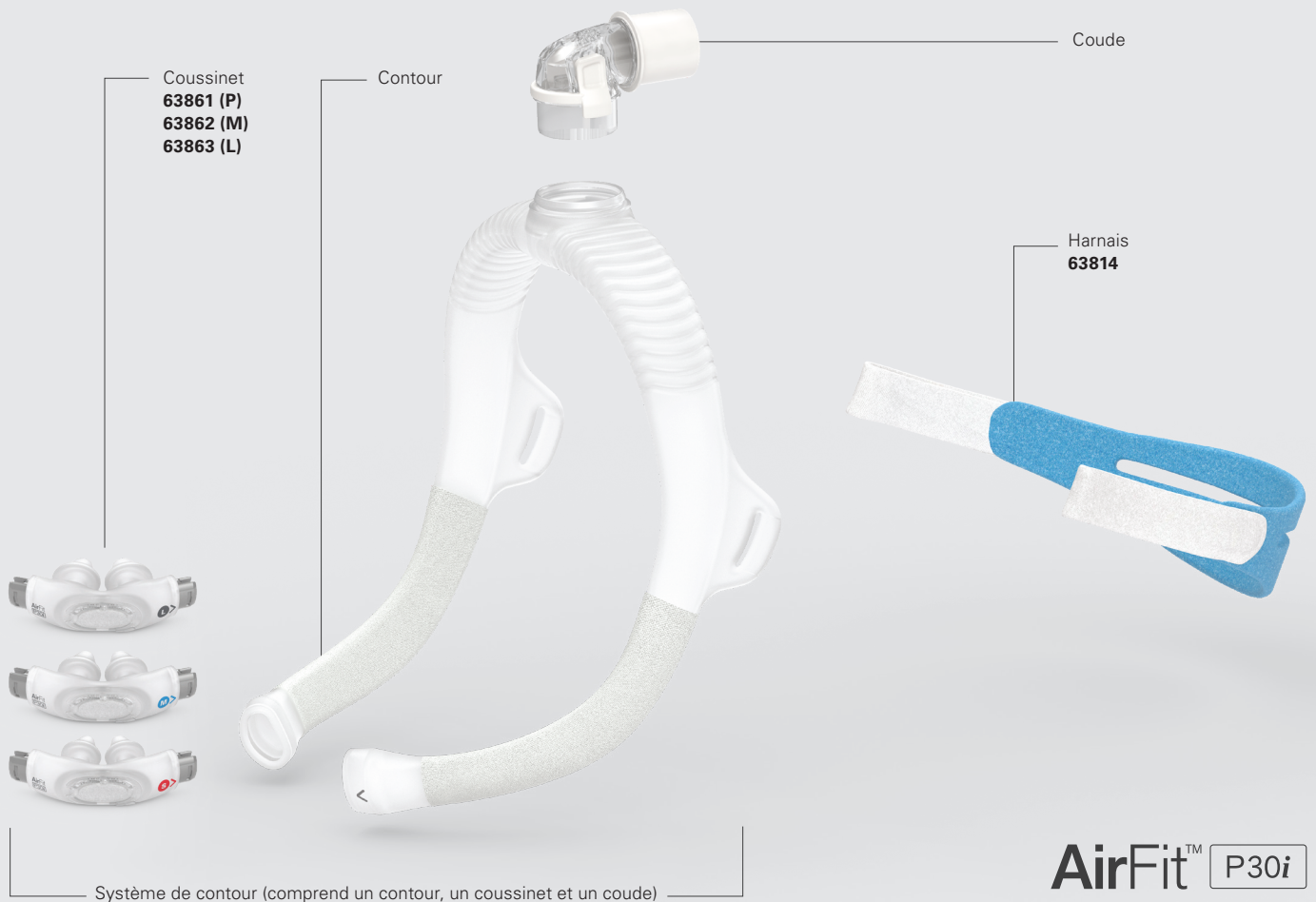



ResMed

AirFit™ P30i

Guide d'ajustement du AirFit P30i



- Placez le contour et le harnais sur la tête jusqu'à ce que le coude soit placé sur le dessus et que le harnais soit derrière la tête.



- Placez le coussinet sous le nez et alignez les coussins dans les narines.



- Serrez ou desserrez le harnais jusqu'à ce que le coussinet s'adapte confortablement sous le nez.



- Appuyez sur les boutons latéraux du coude et détachez-le du contour. Branchez le circuit respiratoire de l'appareil au coude, puis fixez le tout au contour.

Options supplémentaires

Pour les patients qui ont les cheveux longs, nous recommandons de faire sortir les cheveux dessus le harnais. S'ils sont attachés en queue de cheval, elle devrait être suffisamment haute pour émerger confortablement au-dessus du harnais.

Consultez le guide de l'utilisateur pour obtenir des instructions plus détaillées et des renseignements d'étiquetage complets, notamment sur les indications, les contre-indications, les mises en garde et précautions.

1 Étude clinique guidée externe de ResMed menée auprès de 23 utilisateurs actuels des coussins narinaires pour masque de mai à juin 2018 à Sydney, en Australie qui ont fait l'essai du ResMed AirFit P30i et des coussins en gel Respronics DreamWear de Phillips[®]. L'un des participants a retiré son consentement à la fin de l'étude (n = 22).

Distribué par ResMed Corp, 9001 Spectrum Center Boulevard, San Diego, CA 92123 É.-U. 1 858 836-5000 ou 1 800 424-0737 (numéro sans frais). Visitez notre site Internet ResMed.com pour plus d'information sur nos bureaux dans le monde. AirFit est une marque de commerce et/ou une marque déposée de la famille d'entreprises ResMed. DreamWear et Philips sont des marques de commerce de Koninklijke Philips N.V., déposées aux É.-U. et dans d'autres pays. La fiche technique peut être modifiée sans préavis. Pour des informations sur les brevets et autres propriétés intellectuelles, visitez ResMed.com/ip. © 2019 ResMed. 1011167/1 2019-02

ResMed.com/AirFitP30i